

## ¡Bienvenido!

Configuremos las cuentas y aplicaciones de su teléfono Android. Esto permitirá que su teléfono transmite sus signos vitales a su expediente médico en Mosaic.

## Descripción general

A continuación, se muestra un resumen de los pasos que seguirá para configurar su teléfono Android correctamente. Cada paso será explicado en detalle en las siguientes páginas y lo guiará en todo el proceso.


Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6	Apoyo
Configuración de su cuenta de MyChart / descargar la aplicación	Configuración de la aplicación Google Fit	Como descargar y configurar la aplicación Omron Connect	Medidor de presión arterial Omron / como unir las aplicaciones	Configuración de la aplicación Omron	Configuración de la aplicación MyChart	Soluciones a problemas con su teléfono Android

**IMPORTANTE:** Complete los pasos en este documento en el orden en que se muestran. Asegúrese de completar cada paso antes de avanzar al siguiente paso del proceso.

### Cómo funciona todo el sistema




Su medidor de presión arterial Omron transmite su información de signos vitales y su presión arterial a la aplicación Omron Connect

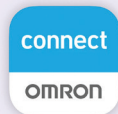

La aplicación Omron Connect transmite sus datos a la aplicación Google Fit



La aplicación Google Fit transmite sus datos con la aplicación de MyChart

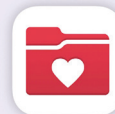

Su aplicación de MyChart transmite datos de su presión arterial a su expediente en Mosaic



**IMPORTANTE:** Todos los permisos deben configurarse en cada aplicación para permitir que los datos se transmiten entre las aplicaciones. Tendrá que ingresar a cada aplicación y configurar.

**¡EMPECEMOS!**

## Paso 1: Configure su cuenta y aplicación de MyChart

### Paso 1-A

Regístrese para una cuenta de MyChart:

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/MosaicMyChart>

### Paso 1-B

Descargue la aplicación de MyChart a su teléfono y configúralo


Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/MyChartAndroidApp>

## Paso 2

Abra y configure la aplicación Google Fit en su teléfono Android:

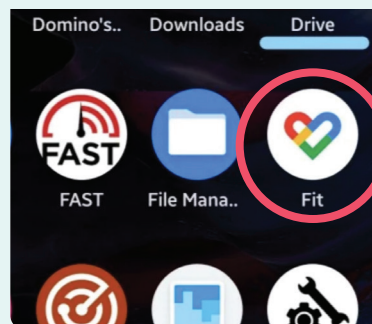

## Paso 3

Descargue la aplicación Omron Connect:

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/OmronConnectAndroidApp>

## Paso 4


Conecte su **MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL OMRON** a la **APLICACIÓN OMRON CONNECT**.

Siga los pasos que se encuentran en el guía que vino con su medidor Omron. Cuando termine, continúe al paso 5.

## Paso 5: Configure su aplicación Omron Connect


### Paso 5-A

- Inicie la aplicación Omron Connect en su teléfono
- Haga clic en el botón **"MORE"**; luego navegue a la página principal de la aplicación

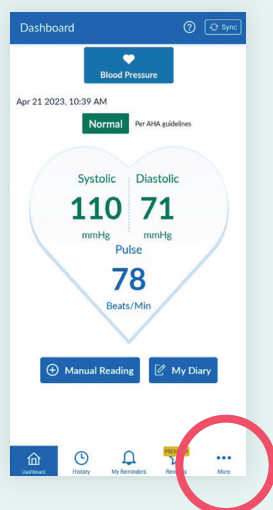


### Paso 5-B

- Haga clic en el botón **"PROFILE"**

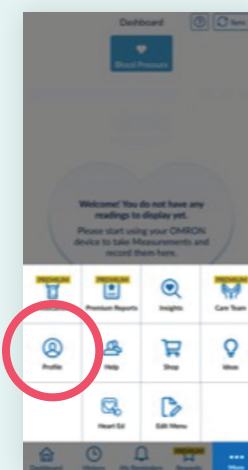

### Paso 5-C

- Haga clic en el botón **"APP SETTINGS"**

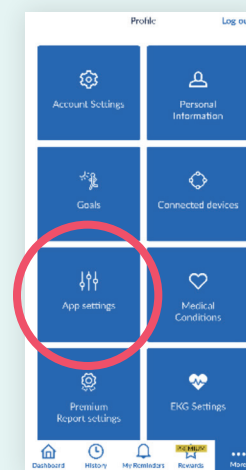


CONTINUAR EL PASO 5

## Paso 5: Configure su aplicación Omron Connect


### Paso 5-D

- En la sección de "APP SETTINGS", navegue hacia abajo a la sección de "TRACKING", asegúrese de que botón "BLOOD PRESSURE" este en la posición "ON"
- En la parte inferior de la pantalla, bajo la sección "SHARE DATA WITH OTHER APPS" haga clic en "GOOGLE FIT"
- En la siguiente pantalla, haga clic en el botón "LINK"
- Si una notificación de "PERMISSIONS" aparece, seleccione "ALLOW"

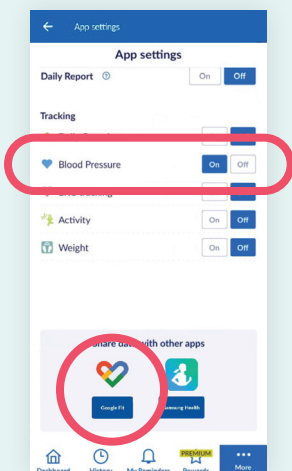


### Paso 5-E

- En la pantalla principal de su teléfono, haga clic en su aplicación de "SETTINGS"

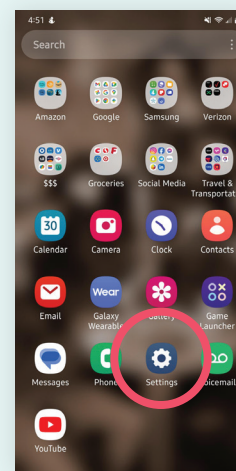


### Paso 5-F

- En la pantalla de "SETTINGS" haga clic en "APPS"

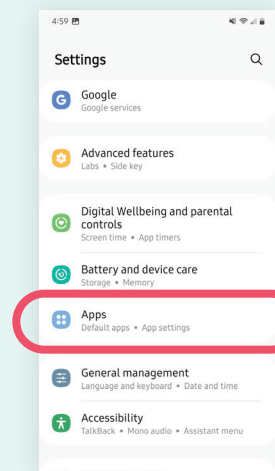


### Paso 5-G

- En la pantalla de "APPS" navegue hacia abajo y haga clic en "OMRON CONNECT APP"

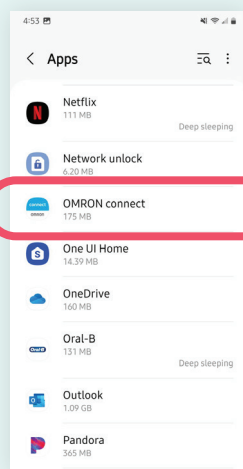


### Paso 5-H

- En la aplicación de "APP INFO" haga clic en "PERMISSIONS"

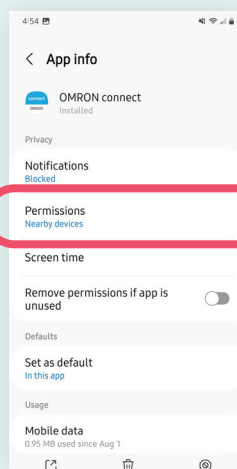


### Paso 5-I

- En la pantalla de "APP PERMISSIONS" haga clic en "LOCATION"

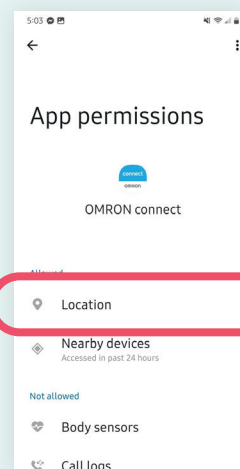

### Paso 5-J


- En la pantalla de "LOCATION PERMISSION" haga clic en "ALLOW"

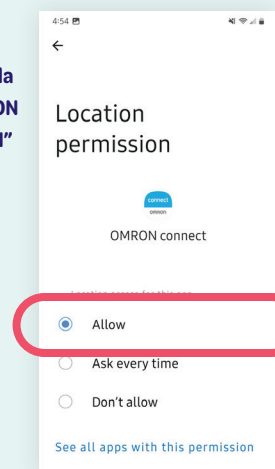

## Paso 6: Configure los permisos de la aplicación de MyChart para su teléfono Android


### Paso 6-A

- Abra la aplicación de MYCHART
- Ingrese a su cuenta y seleccione "MENU"

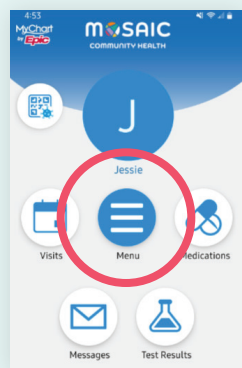


### Paso 6-B

- En la pantalla del "MENU" seleccione "TRACK MY HEALTH"

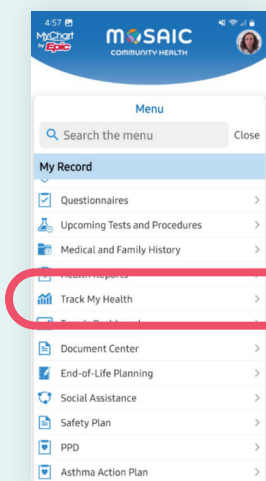


### Paso 6-C

- En la sección "TRACK MY HEALTH", seleccione "CONNECT TO GOOLE FIT"

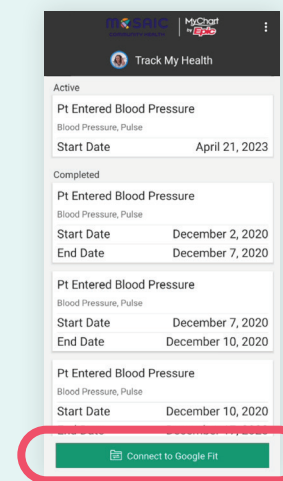


### Paso 6-D

- En la sección de "GOOGLE FIT CONNECTIONS" seleccione "SIGN IN WITH GOOGLE"
- Si una notificación de "PERMISSIONS" aparece, seleccione "ALLOW"

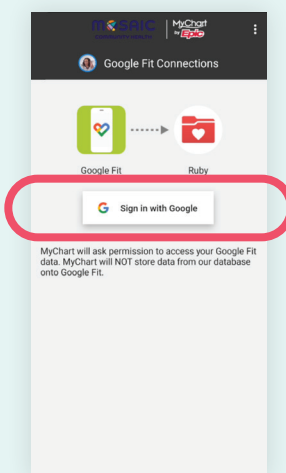

### ¡HA TERMINADO!

Quando sus aplicaciones estén unidas correctamente, su pantalla debería verse así:

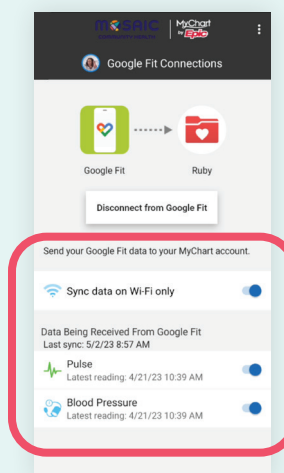

## Apoyo: Soluciones a problemas con su teléfono Android

### Nota

Puede tardar hasta 2 horas para que los datos aparezcan en el expediente del paciente.

### Problema

Los números de mi presión arterial no aparecen en MyChart, pero aparecen en las aplicaciones Omron y GOOGLE FIT.

### Solución

Dentro de la aplicación de MyChart, seleccione "DISCONNECT FROM GOOGLE FIT", y una vez desconectado, seleccione "SIGN IN WITH GOOGLE" y siga las indicaciones para volver a conectar la aplicación Google Fit.

**¿Preguntas? Llámenos al 541-383-3005**