


¡Bienvenido!

Configuremos las cuentas y aplicaciones de su iPhone. Esto permitirá que su teléfono transmite sus signos vitales a su expediente médico en Mosaic

Descripción general

A continuación, se muestra un resumen de los pasos que seguirá para configurar su iPhone correctamente. Cada paso será explicado en detalle en las siguientes páginas y lo guiará en todo el proceso.

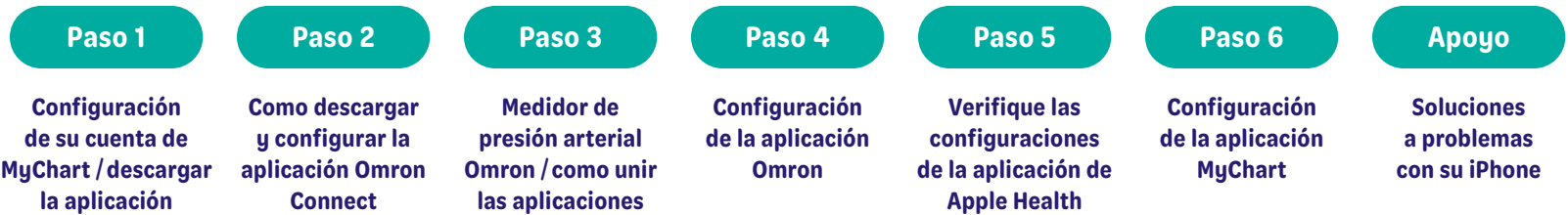


IMPORTANTE: Complete los pasos en este documento en el orden en que se muestran. Asegúrese de completar cada paso antes de avanzar al siguiente paso del proceso.

Cómo funciona todo el sistema




Su medidor de presión arterial Omron transmite su información de signos vitales y su presión arterial a la aplicación Omron Connect

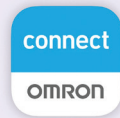

La aplicación Omron Connect transmite sus datos a la aplicación Apple Health



La aplicación Apple Health transmite sus datos con la aplicación de MyChart

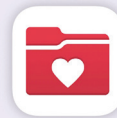

Su aplicación de MyChart transmite datos de su presión arterial a su expediente en Mosaic



IMPORTANTE: Todos los permisos deben configurarse en cada aplicación para permitir que los datos se transmiten entre las aplicaciones. Tendrá que ingresar a cada aplicación y configurar.

¡EMPECEMOS!

Paso 1: Configure su cuenta y aplicación de MyChart

Paso 1-A
Regístrese para una cuenta de MyChart:

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/MosaicMyChart>

Paso 1-B
Descargue la aplicación de MyChart a su teléfono y configúralo

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/AppleMyChart>

Paso 2

Descargue la aplicación Omron Connect:

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/OmronConnect>

Paso 3


Conecte su **MEDIDOR DE PRESIÓN ARTERIAL OMRON** a la **APLICACIÓN OMRON CONNECT**.

Siga los pasos que se encuentran en el guía que vino con su medidor Omron. Cuando termine, continúe al paso 4.

Paso 4: Configure su aplicación Omron Connect


Paso 4-A

- Inicie la aplicación Omron Connect en su teléfono
- Haga clic en el botón "MORE"; luego navegue a la página principal de la aplicación

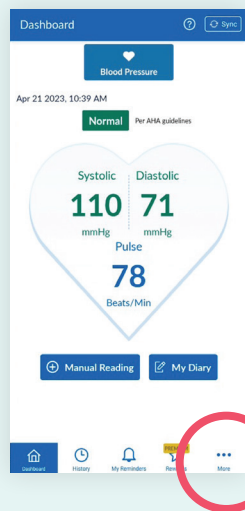


Paso 4-B

- Haga clic en el botón "PROFILE"

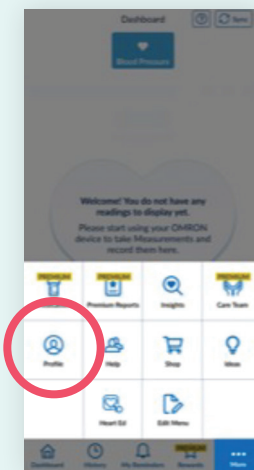

Paso 4-C

- Haga clic en el botón "APP SETTINGS"

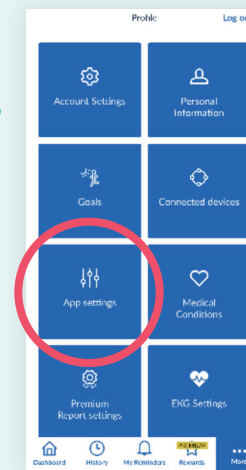


CONTINUAR EL PASO 4

Paso 4: Configure su aplicación Omron Connect


Paso 4-D

- En la sección de “APP SETTINGS”, navegue hacia abajo a la sección de “TRACKING”, asegúrese de que botón “BLOOD PRESSURE” este en la posición “ON”
- En la parte inferior de la pantalla, bajo la sección “SHARE DATA WITH OTHER APPS” haga clic en “APPLE HEALTH”
- En la siguiente pantalla, haga clic en el botón “LINK”

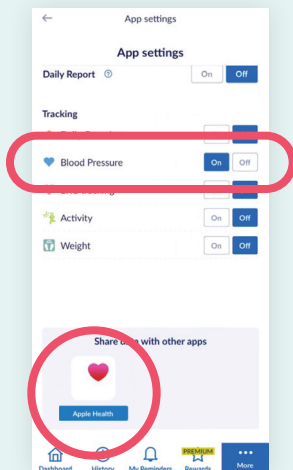


Paso 4-E

- En la sección “HEALTH ACCESS”, asegúrese de que los siguientes botones están en la posición “ON”: “DIASTOLIC BLOOD PRESSURE”, “HEART RATE” y “SYSTOLIC BLOOD PRESSURE”
- Luego, haga clic en botón “ALLOW” en la esquina a lado derecha de la parte superior de su pantalla

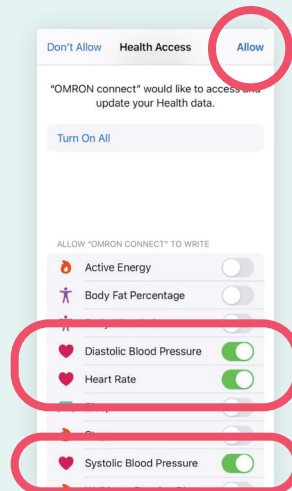

Paso 4-F


- Después de completar el paso anterior, verá la pantalla que se muestra aquí, indicando que la aplicación Apple Health está UNIDA con su aplicación Omron Connect
- Presione el botón de inicio de su teléfono para salir de la aplicación “OMRON CONNECT” y para regresar a su pantalla principal

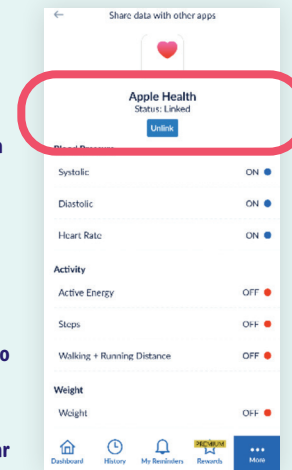

Paso 4: Administre las configuraciones de ubicación para la aplicación Omron Connect


Paso 4-G

- En la pantalla de principal seleccione la aplicación de “SETTINGS”

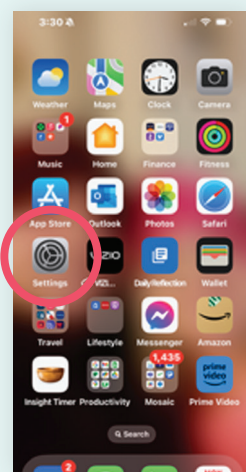


Paso 4-H

- En la pantalla de “SETTINGS” navegue hacia abajo y seleccione “OMRON CONNECT”

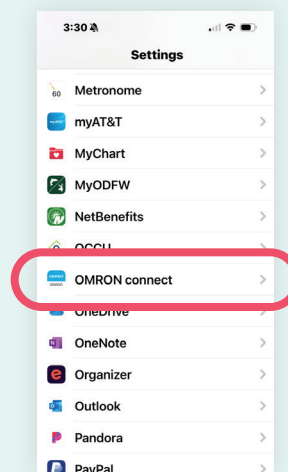

Paso 4-I


- En la pantalla de “OMRON CONNECT”, configure el parámetro de ubicación bajo “LOCATION” a “WHILE USING THE APP”
- Navegue a la pantalla INICIAL de su teléfono para salir de “SETTINGS”

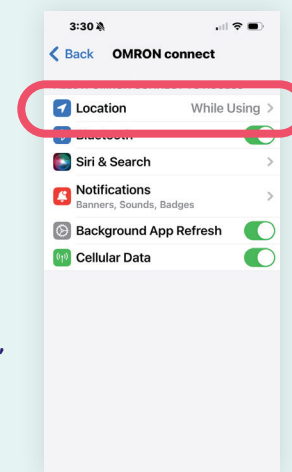

Paso 5: Verifique las configuraciones de la aplicación de Apple Health


Paso 5-A

- Seleccione la aplicación de "SETTINGS" de su iPhone

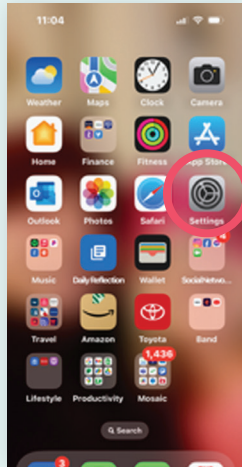


Paso 5-B

- Seleccione la aplicación de "APPLE HEALTH"

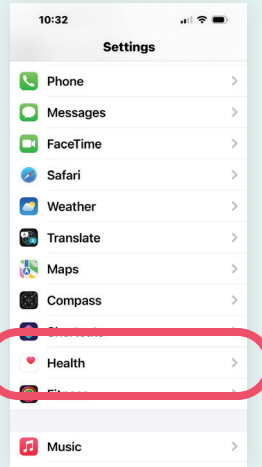


Paso 5-C

- Seleccione la aplicación de "OMRON CONNECT"

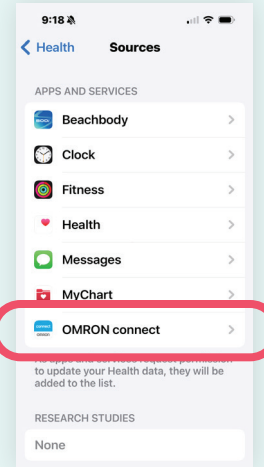

Paso 5-D


- Verifique que los siguientes botones estén en la posición "ON": BLOOD PRESSURE, HEART RATE, y SYSTOLIC BLOOD PRESSURE
- Presione el botón de inicio de su teléfono para salir de la aplicación "OMRON CONNECT" y para regresar a su pantalla principal

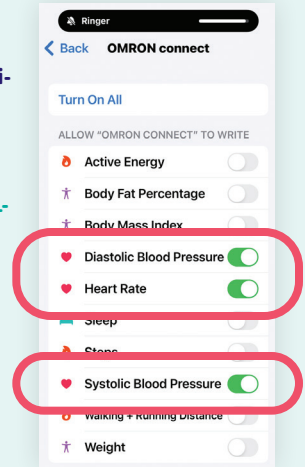

Paso 6: Configure los permisos de la aplicación de MyChart para su iPhone


Paso 6-A

- Abra la aplicación de MYCHART
- Ingrese a su cuenta y seleccione "MENU"

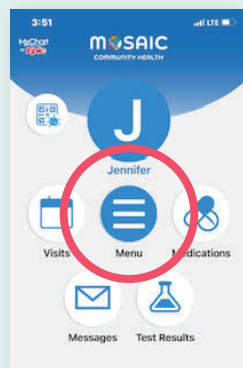


Paso 6-B

- En la pantalla del "MENU" seleccione "TRACK MY HEALTH"

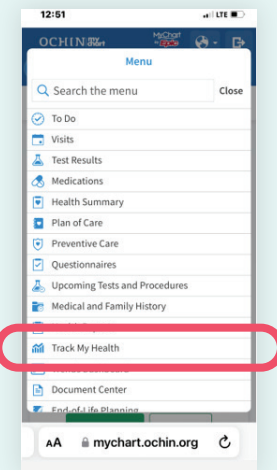


Paso 6-C

- En la sección "TRACK MY HEALTH", seleccione "CONNECT MY HEALTH" en la parte de abajo

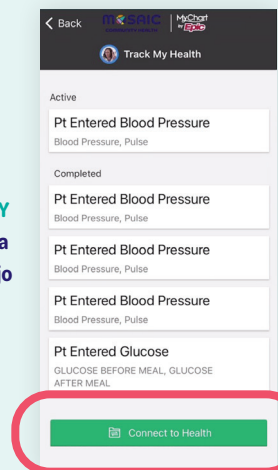

Paso 6-D


- En la sección de "HEALTH CONNECTIONS", haga clic en el botón "CONNECT TO HEALTH"

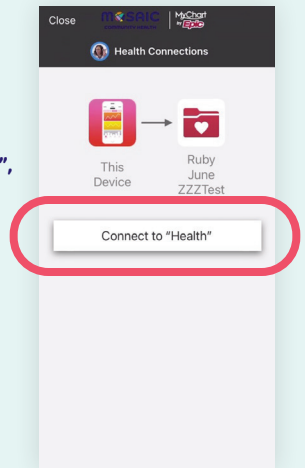

CONTINUAR EL PASO 6

iHA TERMINADO!

Cuando sus aplicaciones estén unidas correctamente, su pantalla debería verse así:

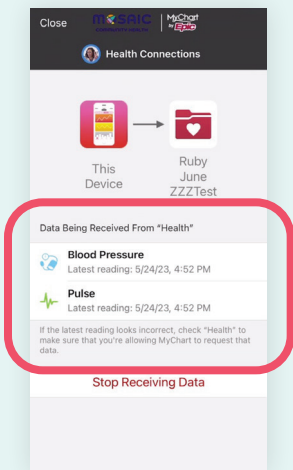

Apoyo: Soluciones a problemas con su iPhone

Nota

Puede tardar hasta 2 horas para que los datos aparezcan en el expediente del paciente.

Problema #1

Los números de mi presión arterial no aparecen en MyChart, pero aparecen en las aplicaciones Omron y Apple Health.

Solución

Dentro de la aplicación de MyChart, seleccione "STOP RECIEVING DATA", y una vez desconectado, seleccione "CONNECT TO MY HEALTH" y siga las indicaciones para volver a conectar la aplicación Apple Health.

Problema #2

Los números de mi presión arterial no aparecen en la aplicación Apple Health o MyChart.

Solución

Apague y prenda su teléfono a menudo solucionará este problema.

¿Preguntas? Llámenos al 541-383-3005