


## ¡Bienvenido!

Configuremos las cuentas y aplicaciones de su iPhone. Esto permitirá que su teléfono transmite sus signos vitales a su expediente médico en Mosaic.

## Descripción general

A continuación, se muestra un resumen de los pasos que seguirá para configurar su iPhone correctamente. Cada paso será explicado en detalle en las siguientes páginas y lo guiará en todo el proceso.

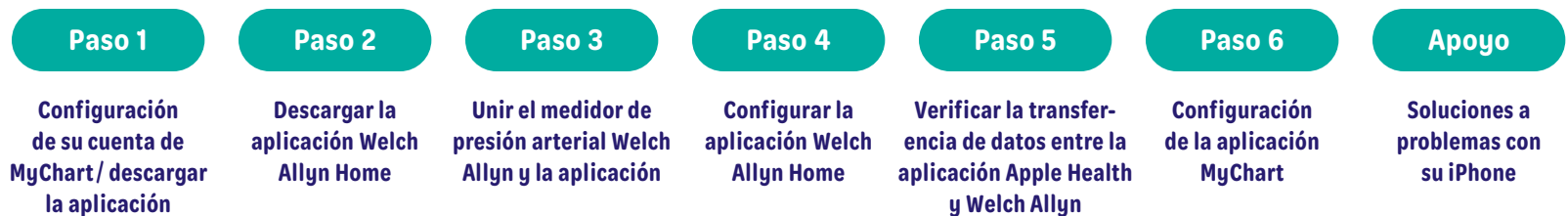

**IMPORTANTE:** Complete los pasos en este documento en el orden en que se muestran. Asegúrese de completar cada paso antes de avanzar al siguiente paso del proceso.

### Cómo funciona todo el sistema




Su medidor de presión arterial Welch Allyn transmite su información de signos vitales y su presión arterial a la aplicación Welch Allyn Home



La aplicación Welch Allyn Home transmite sus datos a la aplicación Apple Health



La aplicación Apple Health transmite sus datos a la aplicación de MyChart

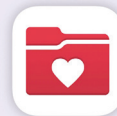

Su aplicación de MyChart transmite datos de su presión arterial a su expediente en Mosaic



**IMPORTANTE:** Todos los permisos deben configurarse en cada aplicación para permitir que los datos se transmiten entre las aplicaciones. Tendrá que ingresar a cada aplicación y configurar.

**¡EMPECEMOS!**

**Paso 1: Configure su cuenta y aplicación de MyChart**

**Paso 1-A**

Regístrese para una cuenta de MyChart:

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/MosaicMyChart>

**Paso 1-B**

Descargue la aplicación de MyChart a su teléfono y configúrela

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/AppleMyChart>

**Paso 2**

Descargue la aplicación **WELCH ALLYN HOME** y cree una cuenta.

Escanee este código QR...



o visite <https://bit.ly/WelchAllynHome>

**Paso 3**


Conecte su **MEDIDOR DE PRESION ARTERIAL WELCH ALLYN** a la aplicación **WELCH ALLYN HOME**.

Siga los pasos que se encuentran en el guía **WELCH ALLYN CONNECTION GUIDE** que vino con su medidor Welch Allyn. Cuando termine, continúe al paso 4.

**Paso 4: Configure su aplicación Welch Allyn Home**


**Paso 4-A**

- Inicie la aplicación **“WELCH ALLYN HOME”** en su teléfono
- En la pantalla principal haga clic en **“SETTINGS”**.

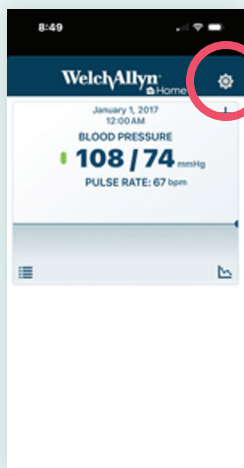


**Paso 4-B**

- Haga clic en **“MEASUREMENTS & GOALS”**.
- Haga clic en **“DONE”** para completar este paso.

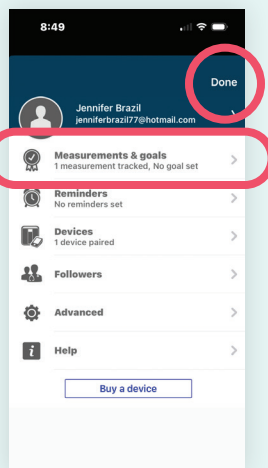

**Paso 4-C**

- Verifique que estos parámetros estén en la posición **“ON:” “BLOOD PRESSURE”** y **“SEND READINGS TO HEALTHKIT”**
- Haga clic en **“SAVE”** para completar este paso.

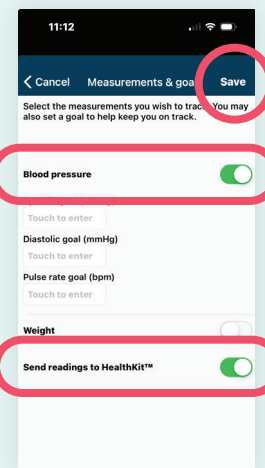


**CONTINUAR EL PASO 4**

**Paso 4: Configure su aplicación Welch Allyn Home**


**Paso 4-D**

- Haga clic en "DEVICES".

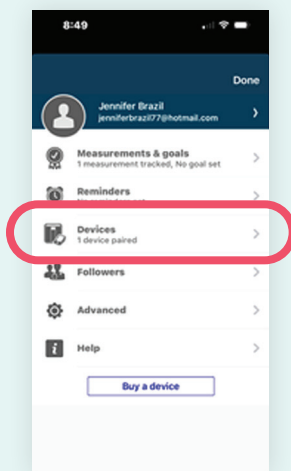

**Paso 4-E**


- VERIFIQUE que su dispositivo Welch Allyn este conectado.
- Si no hay ningún dispositivo conectado, vaya a las instrucciones incluidas con su dispositivo para completar la conexión de su dispositivo.

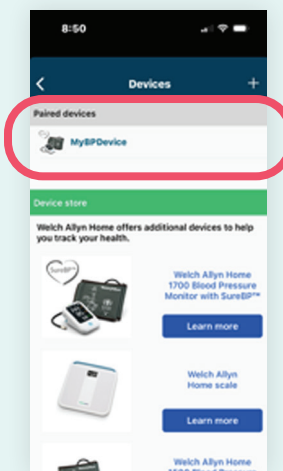

**Paso 5: Verifique que su aplicación Apple Health esté recibiendo datos de la aplicación Welch Allyn**


**Paso 5-A**

- En su iPhone, seleccione la aplicación "SETTINGS".

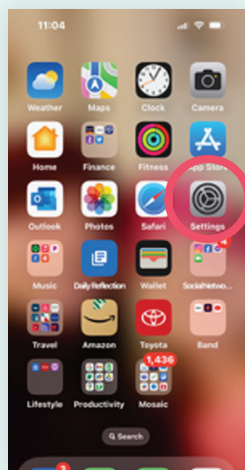


**Paso 5-B**

- Seleccione la aplicación "APPLE HEALTH".

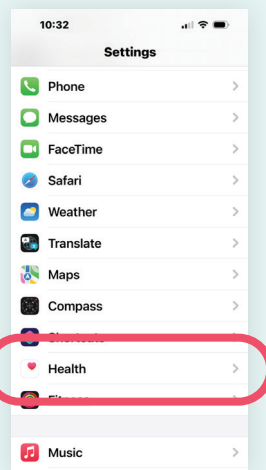

**Paso 5-C**

- Seleccione "DATA ACCESS AND DEVICES".

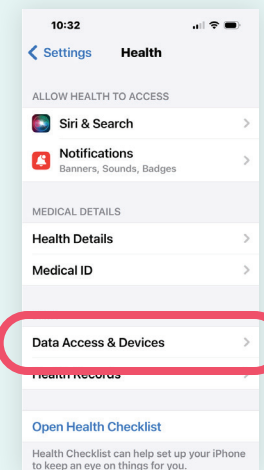


**CONTINUAR EL PASO 5**

**Paso 5: Verifique que su aplicación Apple Health esté recibiendo datos de la aplicación Welch Allyn**


**Paso 5-D**

- Seleccione **“WELCH ALLYN HOME”**

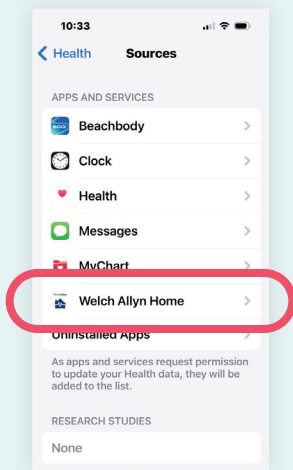

**Paso 5-E**


- Verifique que estos parámetros estén en la posición **“ON:” “HEART RATE”, y “SYSTOLIC BLOOD PRESSURE”**
- Haga clic en el botón **“HOME”** de su teléfono para salir de la aplicación **WELCH ALLYN HOME** y para volver a la pantalla principal

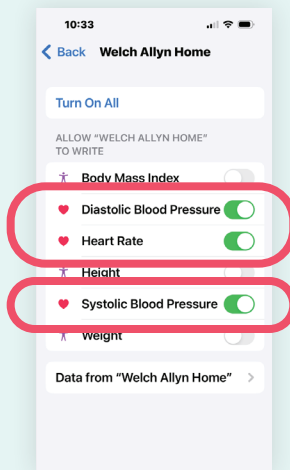

**Paso 6: Configure los permisos de la aplicación MyChart para su iPhone**


**Paso 6-A**

- Abra la aplicación de **MYCHART**
- Ingrese a su cuenta y seleccione **“MENU”**

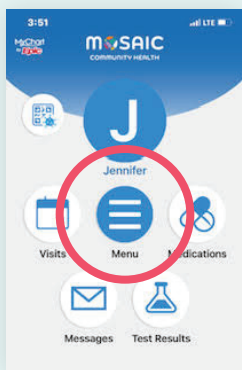


**Paso 6-B**

- Seleccione **“TRACK MY HEALTH”** en el menú de la pantalla

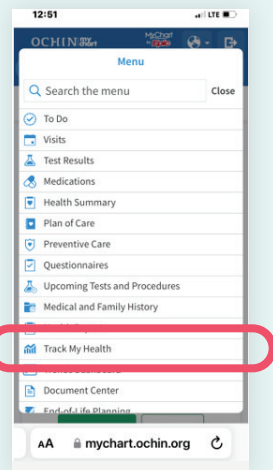


**Paso 6-C**

- En la pantalla de **“TRACK MY HEALTH”** Seleccione **“CONNECT TO HEALTH”**

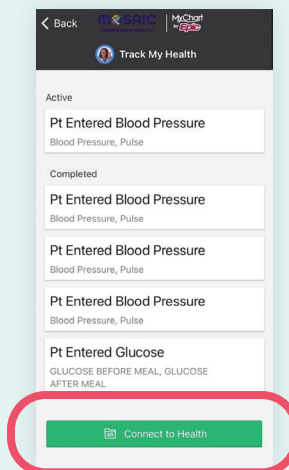

**Paso 6-D**


- En la pantalla de **“HEALTH CONNECTIONS”**, haga clic en el botón **“CONNECT TO HEALTH”**

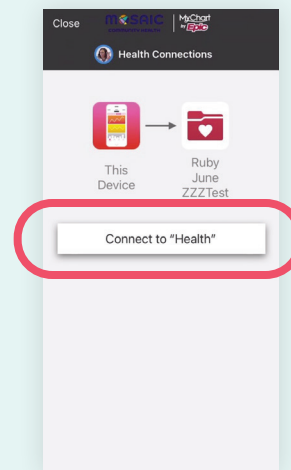

**CONTINUAR EL PASO 6**

**iHA  
TERMINADO!**

Quando sus aplicaciones estén unidas correctamente, su pantalla debería verse así:

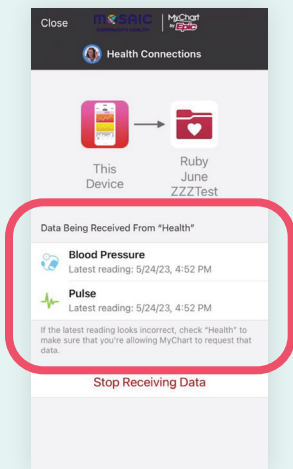

**Apoyo: Soluciones a problemas con su iPhone**

**Nota**

Puede tardar hasta 2 horas para que los datos aparezcan en el expediente del paciente.

**Problema #1**

Los números de mi presión arterial no aparecen en MyChart, pero aparecen en las aplicaciones Welch Allyn y Apple Health.

**Solución**

Dentro de la aplicación de MyChart, seleccione "STOP RECIEVING DATA", y una vez desconectado, seleccione "CONNECT TO MY HEALTH" y siga las indicaciones para volver a conectar la aplicación Apple Health.

**Problema #2**

Los números de mi presión arterial no aparecen en la aplicación Apple Health o MyChart.

**Solución**

Apague y prenda su teléfono a menudo solucionará este problema.

**¿Preguntas? Llámenos al 541-383-3005**